
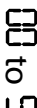
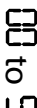


Display window icons

The following icons may appear in the display window:

---	(steady)	answering machine off
---	(flashing)	alternating with  or any other number: answering machine is on, day and time are not set
	(steady)	number of messages (already played)
	(flashing)	number of messages (not yet played)
R1	(steady)	recording outgoing message
FL		memory is full

Customer Service Information

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)


www.amplicomusa.com

Made in China

Answering Machine AB 900



AB 900 Answering Machine

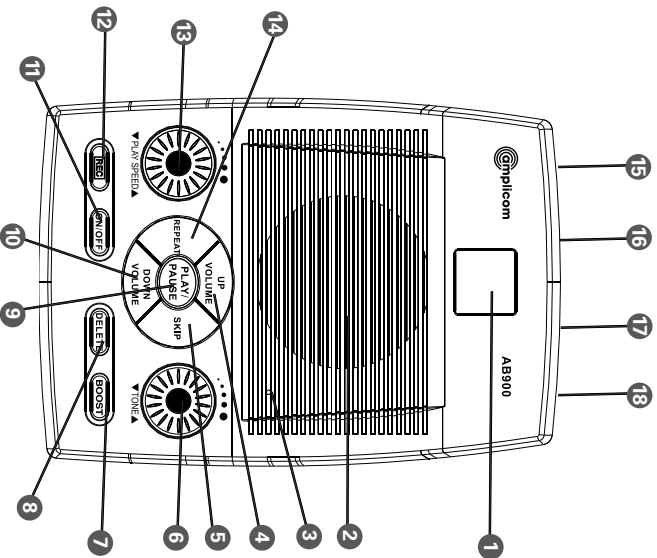

- 1 Display window
- 2 Speaker
- 3 Microphone
- 4 Volume up
- 5 Next message
- 6 Tone control
- 7 Boost on / off
- 8 Delete
- 9 Play / pause
- 10 Volume down
- 11 On / off / stop
- 12 Record
- 13 Speed control
- 14 Previous message
- 15 Power adapter socket
- 16 Headset jack
- 17 Ring delay switch
- 18 Telephone line jack



Warning: This machine has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.

Set up

Connect answering machine

1. Plug the power adapter into the back of the answering machine and the other end into a wall socket. Turn the power on.
2. Plug the telephone cable into the back of the TEL. LINE jack on the answering machine and the other end into the phone. If your phone does not have a second jack, a line splitter may be necessary.

Record a custom greeting

1. Press and hold the **[RECORD]** button until the recording tone sounds. Continue holding down the button.
2. Start the greeting immediately after hearing the tone.
3. Release the **[RECORD]** button when finished recording.

Listen to messages

1. To listen to messages, press the **[PLAY/PAUSE]** button once.
2. Press the **[PLAY/PAUSE]** button while messages are playing to pause the playback.

3. Stop listening to messages at any time by pressing the **[STOP]** button.

Repeat the current message

Press the **[REPEAT]** button to repeat the message currently playing.

Repeat the previous message

Press and hold the **[REPEAT]** button until a signal tone is played to repeat the previous message.

Skip one message

Press the **[SKIP]** button once to skip the message currently playing. The unit will play the next message.

Fast forward

Press the **[SKIP]** button several times in succession to rapidly skip several messages.

Delete one message


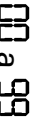

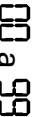
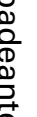
Press the **[DELETE]** button while a message is playing to delete the message.

Delete all messages

After the last message is played, press the **[DELETE]** button and hold until the unit plays a signal tone.

Iconos de la pantalla

En la pantalla pueden aparecer los siguientes iconos:

- (fijo) el contestador automático está apagado
- (parpadeante) si alternan con  o cualquier otro número: el contestador automático está encendido, pero no se ha establecido la fecha ni la hora
-  a  (fijo) cantidad de mensajes (ya reproducidos)
-  a  (parpadeante) cantidad de mensajes (sin reproducir)
- Ri (fijo) grabación de mensaje saliente
- FL la memoria está llena

Información del servicio al cliente

Centro de servicio de Amplicom en los EE.UU.

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com


Hecho en China

Contestador automático AB 900



Guía de inicio rápido

Contestador automático AB 900

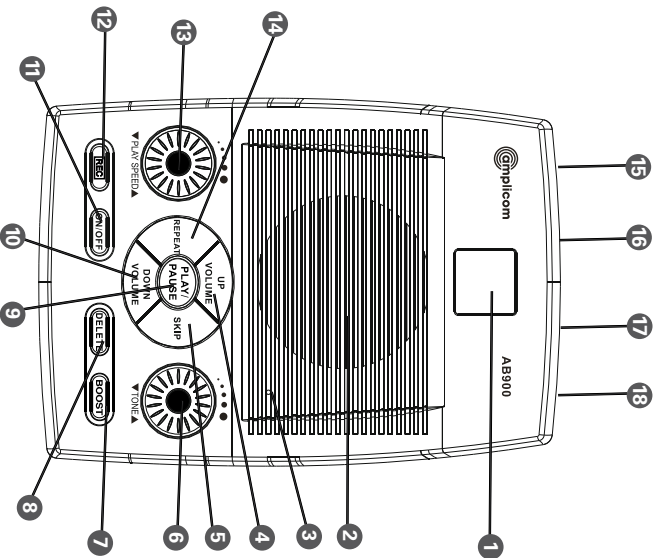

Advertencia: Esta máquina está diseñada especialmente para personas con dificultades auditivas y su volumen normal es más alto que el de un teléfono normal. El uso de la función de elevación de volumen puede causar daño en la función auditiva a personas que no tienen problemas de este tipo.

- 1 Pantalla
- 2 Altavoz
- 3 Micrófono
- 4 Subir volumen
- 5 Mensaje siguiente
- 6 Control de tono
- 7 Activar / desactivar elevación de volumen
- 8 Eliminar
- 9 Reproducir / pausar
- 10 Bajar volumen
- 11 Encender / apagar / detener
- 12 Grabar
- 13 Control de velocidad
- 14 Mensaje anterior
- 15 Enchufe del adaptador de alimentación
- 16 Conector de los auriculares
- 17 Selector de retardo de respuesta a llamada
- 18 Conector de línea telefónica

Instalación

Cómo conectar el contestador automático

1. Enchufe el adaptador de alimentación en la parte posterior del contestador automático y el otro extremo en un enchufe de pared. Encienda el contestador automático.
2. Enchufe el cable telefónico en el conector TEL.LINE en la parte posterior del contestador automático y el otro extremo en el teléfono. Si su teléfono no tiene dos conectores, es posible que necesite un divisor.

Cómo grabar un saludo personalizado

1. Oprima el botón hasta que escuche el tono de grabación. Mantenga el botón oprimido.
2. Comience a grabar el saludo tan pronto como escuche el tono.
3. Cuando termine de grabar, suelte el botón .

Cómo escuchar los mensajes

1. Para escuchar los mensajes, oprima el botón una sola vez.
2. Para pausar la reproducción de los mensajes, oprima el botón mientras los escucha.
3. Oprima el botón para dejar

de escuchar los mensajes en cualquier momento.

Cómo repetir el mensaje actual

Para repetir el mensaje que está reproduciéndose, oprima el botón .

Cómo repetir el mensaje anterior

Para repetir el mensaje anterior, oprima el botón hasta escuchar un tono.

Cómo saltar un mensaje

Para saltar el mensaje que está reproduciéndose, oprima una vez el botón . La unidad reproducirá el mensaje siguiente.

Cómo avanzar de forma rápida

Para saltar rápidamente varias mensajes, oprima el botón varias veces seguidas.

Cómo borrar un mensaje

Para eliminar un mensaje, oprima el botón mientras se está reproduciendo.

Cómo borrar todos los mensajes

Después de reproducir el último mensaje, oprima el botón hasta que la unidad emita un tono de señal.